


Medikro Grip -kahvan käyttö- ja puhdistusohjeet

Käyttöohjeet

Paina virtausanturia alas potilaskahvaan, kunnes se kiinnittyy tukevasti paikoilleen.

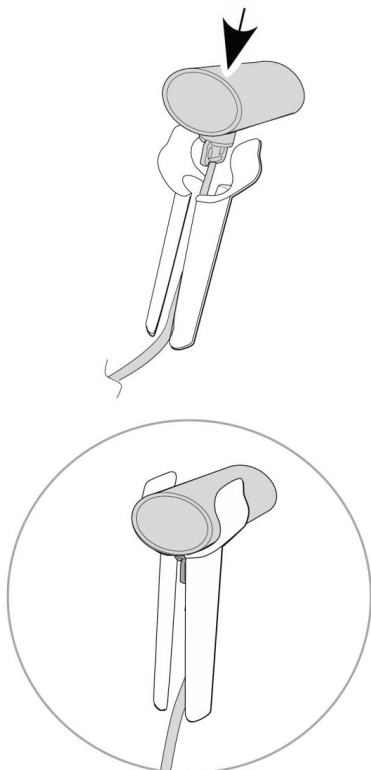

Varoitukset

Tämän asennusohjeen varoitusosa määrittelee niitä tilanteita tai toimintoja, jotka voivat johtaa potilaan loukkaantumiseen, sairastumiseen tai kuolemaan.

VAROITUS Pidä uudelleenkäytettävä potilaskahva puhtaana. Kontaminoitunut laite saattaa levittää infektiota potilaskontaktissa.

VAROITUS Kahvat ei ole pakattu steriileihin pakkauksiin.

Huomautukset

Tämän asennusohjeen huomautusosa määrittelee niitä tilanteita tai toimintoja, jotka voivat johtaa laitteen rikkoutumiseen, vikautumiseen tai tietojen häviämiseen.

HUOMAUTUS Käytä tätä kahvaa seuraavien spirometrien kanssa: Medikro Nano, Medikro Primo ja Medikro Pro.

HUOMAUTUS Puhdista potilaskahva jokaisen potilaan jälkeen.

Puhdistusohjeet

Puhdista kahva säännöllisesti. Seuraavat puhdistusaineet ovat yhteensopivia potilaskahvan kanssa:

- 70 % isopropyylialkoholi
- 10 % kloorivalkaisuliuos
- 55-60 % etanoli (esim. Kiilto Easydes)

Huomautukset

Tämän asennusohjeen huomautusosa määrittelee niitä tilanteita tai toimintoja, jotka voivat johtaa laitteen rikkoutumiseen, vikautumiseen tai tietojen häviämiseen.

HUOMAUTUS Älä käytä potilaskahvan puhdistamiseen liinoja tai liuoksia, jotka sisältävät kvartaarisia ammoniumyhdisteitä (ammoniumklorideja) tai glutaraldehydi-pohjaisia desinfiointiaineita.

HUOMAUTUS Huomioi desinfiointissa oman työpaikkasi toimintatavat ja standardit tai paikalliset säädökset.

Hävittämishjeet ja materiaalit

GTIN-koodeille: 06420099000684 ja 06420099000691

Materiaalit: Kahva: PA66, Yksittäispussi: OPP+PE, Ulkolaatikko: Aaltopahvi ja Ulkopussi: PP

Kahva, pussit ja ulkolaatikko tulee hävittää kansallisten tai paikallisten lakien tai oman toimipisteesi hävitysohjeiden mukaisesti. Kaikki materiaalit ovat kierrätettäviä tai poltettavia. Kaikista materiaaleista on pyynnöstä saatavissa tuoteturvatiedote.

Tuote on CE-merkitty ja se täyttää lääkinnällisistä laitteista annetun neuvoston direktiivin 93/42/ETY.

HUOMAUTUS Katso neuvoja Käyttäjän oppaasta tai muista asiaan liittyvistä dokumenteista.